



# Pluggierz Uni-Fit

## Manual Handleiding Handbuch Manuale

-  
-  



## pluggierz earplugs

Your ears love us.





-  
-  

- Do not wear Pluggierz Pro if there is a risk of the connecting cord getting stuck behind moving (machine) components.
- Pluggierz Road; some Countries or states may prohibit using ear plugs while driving – check your local and state’s driving and traffic laws.
- This product may be adversely affected by certain chemical substances. Further information should be sought from the manufacturer.

If Pluggierz are inserted incorrectly or if the warnings in the operating instructions are not followed they may not offer full protection Comfoor B.V. Pluggierz can never be held responsible for improper or incorrect use or any failure to comply with the warnings stated above. For more information, please go to **www.pluggierz.com**.

- Check to see if the Pluggierz are clean and undamaged.
- Hold the top of your auricle (ear-shell) and gently pull it upwards and backwards.
- Insert the hearing protector into the ear canal deep enough as comfortably possible, to seal the ear canal.
- Let go of the auricle and gently and confidently push the hearing protector once again.

Pluggierz Uni-Fit Music Premium comes with one set of high-quality filters. These are fitted as standard in the large earplugs. If

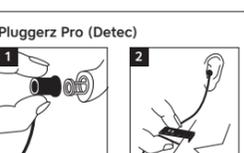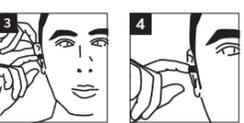

### ENGLISH

Pluggierz protect against the risk the risk of hearing damage as a result of noise. Pluggierz are reusable hearing protectors made from a strong, skin-friendly silicon material.

**Maintenance**
Pluggierz are easy to clean with water and soap, which ensures optimal hygiene. For cleaning of the Music Premium remove filter before cleaning the earplug. Dry them well before inserting them into your ears or placing them back in the pouch.

- Warning**
  - Pluggierz only provide optimal protection when worn continuously in a noisy environment.
  - Do not swallow.
  - Keep out of reach of children till 3 years old.
  - In case of any complaints, please contact us or consult a specialist or physician.
  - Pluggierz must be cleaned in accordance with the instructions of the manufacturer, such as tearing, hardening or adhesion of the material before use. Also make sure that the filter is in place.
  - Never use Pluggierz when damaged, if the material shows signs of decay or if the filter is not in place.
  - Pluggierz must be cleaned in accordance with the instructions of the manufacturer.
  - The sudden, quick removal of the earplug can damage the eardrum.
  - Do not stick sharp objects into the channel or filter of the earplugs.
  - Music premium filters should be kept dry at all times.
  - Do not use the Pluggierz Swim at a depth of more than 3 meters under water. It is strongly advised not to use them while jumping or diving.

- Do not wear Pluggierz Pro if there is a risk of the connecting cord getting stuck behind moving (machine) components.
- Pluggierz Road; some Countries or states may prohibit using ear plugs while driving – check your local and state’s driving and traffic laws.
- This product may be adversely affected by certain chemical substances. Further information should be sought from the manufacturer.

If Pluggierz are inserted incorrectly or if the warnings in the operating instructions are not followed they may not offer full protection Comfoor B.V. Pluggierz can never be held responsible for improper or incorrect use or any failure to comply with the warnings stated above. For more information, please go to **www.pluggierz.com**.

**How to insert Pluggierz Uni-Fit**
In this package, you will find 2 sizes of Pluggierz earplugs. First try the smaller size earplug following the instructions below. If the larger earplug is hard to insert or if it feels uncomfortable, you can try the smaller size.

- Check to see if the Pluggierz are clean and undamaged.
- Hold the top of your auricle (ear-shell) and gently pull it upwards and backwards.
- Insert the hearing protector into the ear canal deep enough as comfortably possible, to seal the ear canal.
- Let go of the auricle and gently and confidently push the hearing protector once again.

Pluggierz Uni-Fit Music Premium comes with one set of high-quality filters. These are fitted as standard in the large earplugs. If

the large earplugs do not fit, you can easily change the filters to the small earplugs. **Warning:** without filters the earplugs do not protect. Never use the earplugs without filters.

Ensure that earplugs are comfortably inserted with a proper seal. If you think that noise is too loud for comfort, the product might not be sealed properly. If you cannot find a proper seal, you may need to consult a physician.

Protection is only guaranteed if the ear protector is inserted correctly.

After use, always store the Pluggierz in the supplied storage case or pouch.

*The European type-examination has been carried out by PZT 1974, An der Junkerei 48F, 26389, Wilhelmshaven, Germany and IFA 0121, Alte Herrstrasse 111, 53757 Sankt Augustin, Germany.*

*U.S. EPA Regulation 40 CFR Part 211 Declaration of Conformity: Comfoor B.V. hereby declares that Pluggierz comply with CE Regulation (EC) 2016/425. The complete text of the EC Declaration of Conformity is available on our website **www.pluggierz.com**.*

### NEEDERLANDS

Pluggierz beschermen tegen het risico van gehoorbeschadiging als gevolg van lawaai. Pluggierz zijn herbruikbaar en zijn gemaakt van duurzaam huidvriendelijk siliconemateriaal.

**Onderhoud**
De Pluggierz zijn eenvoudig te reinigen met water en zeep zodat de hygiëne gewaarborgd blijft. Voor het reinigen van de Music Premium dien je eerst het filter uit de oordop te halen. Laat ze goed drogen alvorens je ze weer in de verpakking stopt.

- Waarschuwing**
  - Pluggierz beschermen alleen volledig, wanneer ze zonder onderbreking gedragen worden in lawaai.
  - Niet voor inwardig gebruik.
  - Buiten gebruik van kinderen t/m 3 jaar houden.
  - Neem bij klachten contact op of raadpleeg een specialist.
  - Controleer de Pluggierz voor elk gebruik op beschadigingen zoals scheuren, verharding of verkleuring van het materiaal en aanwezigheid van het filter.
  - Gebruik Pluggierz nooit wanneer deze beschadigd zijn of het materiaal al aangetast is of het filter al aanwezig is.
  - Pluggierz dienen volgens voorschrift van de fabrikant gereinigd worden.
  - Plotseling en snel verwijderen van de oordop kan schade veroorzaken aan het trommelmies.
  - Niet met de oordop voorwerpen in het kanaaltje of filter van de beschermer komen.
  - Filters Music premium mogen niet nat worden.
  - Gebruik de Swim oordopjes niet dieper

-  
  -  
- Het Europese Unie type-onderzoek is uitgevoerd door PZT 1974, An der Junkerei 48F, 26389, Wilhelmshaven, Duitsland en IFA 0121, Alte Herrstrasse 111, 53757 Sankt Augustin, Duitsland.*
- De dempingswaarden van de gehoorbescherming is vastgesteld conform EN 352-2:2002.*
- Daarbij zijn de APV, SNR, H, M, L waarden volgens ISO 4869-2 bepaald, Gewicht per set 1,6 gram, diameter S-M 7-11mm M-L 8-13mm.*
- EU-Conformiteitsverklaring: Hiermee verklaart Comfoor B.V., dat de Pluggierz voldoen aan de verordening (EU) 2016/425. De volledige tekst van de EU-Conformiteitsverklaring is verkrijgbaar op onze website **www.pluggierz.com**.*

Type		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	SNR	H	M	L
Pro (Detec) <sup>1</sup>	A	24.1	24.6	24.5	24.1	26.5	30.4	29.0	30.9	24	24	21	20
	S	5.3	4.8	4.3	4.8	5.7	4.7	6.4	5.5				
	APV	18.8	19.8	20.2	19.3	20.8	25.7	22.6	25.4				
Road <sup>1</sup>	A	17.8	19.5	19.6	20.8	24.7	29.8	28.7	31.0	23	24	20	17
	S	6.3	3.7	5.0	4.6	4.6	4.6	4.6	6.0				
	APV	11.5	15.8	14.6	16.2	20.1	25.2	24.0	25.0				
Travel <sup>1</sup>	A	25.6	26.4	25.5	26.5	27.9	31.8	30.1	30.3	27	27	25	23
	S	4.8	3.9	3.9	3.6	3.1	4.0	4.2	4.4				
	APV	20.8	22.5	21.6	22.9	24.8	27.8	25.9	25.9				
Sleep <sup>1</sup>	A	25.1	24.8	23.7	23.9	27.1	32.4	37.7	37.9	27	28	24	21
	S	4.5	3.8	4.6	3.4	3.3	4.2	6.7	8.0				
	APV	20.6	21.0	19.1	20.5	23.8	28.2	31.0	29.9				
Water <sup>1</sup>	A	17.3	18.9	21.1	20.7	27.3	31.0	31.9	32.2	25	27	22	19
	S	3.1	4.4	3.4	4.0	4.2	3.6	5.7	3.7				
	APV	14.2	14.5	17.7	18.7	23.1	27.4	26.2	28.5				
Music <sup>2</sup>	A	17.7	19.0	19.1	18.3	22.2	30.5	28.9	27.1	22	24	18	16
	S	5.5	3.5	4.6	3.5	3.8	4.3	3.1	3.8				
	APV	12.2	15.5	14.5	14.8	18.4	26.2	25.8	23.3				
Music Premium <sup>1</sup>	A	19.6	20.4	17.3	16.0	15.5	20.8	20.2	19.4	16	15	13	13
	S	3.3	3.6	4.1	4.3	3.4	4.0	4.7	4.4				
	APV	16.3	16.8	13.2	11.7	12.1	16.8	15.5	15.0				
Shoot & Quiet <sup>2</sup>	A	25.0	24.8	25.7	26.8	29.3	32.1	36.5	34.2	26	27	22	20
	S	6.6	7.6	6.8	7.6	6.8	5.7	5.0	4.2				
APV	18.4	17.2	18.9	19.2	22.4	26.4	31.5	30.0					

For U.S. E.P.A. Regulation statistics see **www.pluggierz.com** Made in Holland

<sup>1</sup> tested by PZT1974

<sup>2</sup> tested by IFA0121

dan 3 meter, springen en duiken in het water wordt afgeraden.

- Draag Pluggierz Pro niet wanneer het risico bestaat dat het verbindingskoord achter bewegende (machine-) onderdelen kan blijven hangen.
- Pluggierz Road; sommige landen of staten kunnen het gebruik van oordopjes tijdens het rijden verbieden - controleer de lokale en landelijke verkeerswetten.
- De werking van dit product kan onder invloed van chemische stoffen beïnvloed worden, verdere informatie kan opgevraagd worden bij de fabrikant.

Protection is only guaranteed if the ear protector is inserted correctly.

After use, always store the Pluggierz in the supplied storage case or pouch.

*The European type-examination has been carried out by PZT 1974, An der Junkerei 48F, 26389, Wilhelmshaven, Germany and IFA 0121, Alte Herrstrasse 111, 53757 Sankt Augustin, Germany.*

*U.S. EPA Regulation 40 CFR Part 211 Declaration of Conformity: Comfoor B.V. hereby declares that Pluggierz comply with CE Regulation (EC) 2016/425. The complete text of the EC Declaration of Conformity is available on our website **www.pluggierz.com**.*

### Hoe breng je Pluggierz Uni-Fit in?

In deze verpakking vind je 2 formaten Pluggierz oordoppen. Probeer eerst de grote oordop volgens onderstaande instructies in het oor te brengen. Indien de grote oordop moeilijk te brengen is of niet comfortabel aanvoelt kun je de kleinere oordop proberen.

- Controleer voor gebruik of de Pluggierz schoon en niet beschadigd zijn.
- Pak de boventank van je oorschelp en trek deze omhoog en naar achteren.
- Plaats de gehoorbeschermers in de gehoorgang zodat ze niet comfortabel zit en het oor goed afsluit.
- Laat de oorschelp los en druk de gehoorbeschermers nogmaals aan.

Pluggierz Uni-Fit Music Premium worden geleverd met één set hoogwaardige filters. Deze zijn standaard geïnstalleerd in de grote oordop. Wanneer u gebruik van de kleine oordop wilt maken, moet u deze oordoppen niet passen kun je de filters eenvoudig omzetten naar de kleine oordoppen. **Waarschuwing:** zonder filter hebben de oordoppen geen beschermende werking. Gebruik de oordoppen nooit zonder filters.

Zorg ervoor dat de oordoppen op een comfortabele manier worden geplaatst met een goede afdichting. Als je denkt dat er te veel geluid doorgelaten wordt, kan het zijn dat de oordop niet goed afdicht. Raadpleeg een deskundige wanneer je denkt dat de oordop niet voldoende afsluit.

De beschermende werking wordt alleen gewaarborgd bij correct plaatsen van de beschermer.

Bewaar de Pluggierz na gebruik in meegeleverde opbergkoker.

*Het Europese Unie type-onderzoek is uitgevoerd door PZT 1974, An der Junkerei 48F, 26389, Wilhelmshaven, Duitsland en IFA 0121, Alte Herrstrasse 111, 53757 Sankt Augustin, Duitsland.*

*De dempingswaarden van de gehoorbescherming is vastgesteld conform EN 352-2:2002.*

*Daarbij zijn de APV, SNR, H, M, L waarden volgens ISO 4869-2 bepaald, Gewicht per set 1,6 gram, diameter S-M 7-11mm M-L 8-13mm.*

*EU-Conformiteitsverklaring: Hiermee verklaart Comfoor B.V., dat de Pluggierz voldoen aan de verordening (EU) 2016/425. De volledige tekst van de EU-Conformiteitsverklaring is verkrijgbaar op onze website **www.pluggierz.com**.*

### DEUTSCH

Pluggierz schützt vor dem Risiko von Gehörschäden durch Lärm und ist ein wiederverwendbarer Gehörschutz von ein hochwertiges hautfreundliches Silikonmaterial.

**Pflege**
Die Pluggierz können einfach mit Wasser und Seife gereinigt werden, sodass die Hygiene gewährleistet bleibt. Gut trocknen lassen, bevor Sie sie wieder benutzen oder zur Aufbewahrung in die Verpackung legen.

- Warnhinweis**
  - Pluggierz schützen nur dann vollständig, wenn sie ununterbrochen im Lärm getragen werden.
  - Nicht zur inwardigen Anwendung.
  - Außer Reichweite von Kinder bis zum 3 Jahren halten.
  - Sollten Beschwerden auftauchen, wenden Sie sich bitte direkt an uns, oder holen Sie Hilfe bei einem Spezialisten.

Die Schutzwirkung der Gehörschutzstöpsel ist nur bei richtigem Sitz der Stöpsel gegeben.

Bewahren Sie die Pluggierz nach Benutzung in mitgelieferten Aufbewahrungsbox.

*Die EG Baumusterprüfung wurde von PZT 1974, An der Junkerei 48F, 26389, Wilhelmshaven, Deutschland und IFA 0121, Alte Herrstrasse 111, 53757 Sankt Augustin, Dutsland, durchgeführt.*

*Die Dämpfungswert des Gehörschutzes wurde gemäß der Europäischen Normen EN 352-2:2002.*

*Dabei wurden die APV, SNR, H, M, L Werte laut ISO 4869-2 bestimmt, Gewicht pro Set 1,6 gram, Durchmesser S-M 7-11mm M-L 8-13mm.*

*EU-Konformitätserklärung: Hiermit erklärt Comfoor b.v., das die PSA Pluggierz der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Der Vollständigkeit der EU-Konformitätserklärung ist unter folgenden Internet-Adressen verfügbar **www.pluggierz.com**.*

- Pluggierz Sollten in Übereinstimmung mit den Hinweisen des Herstellers gereinigt werden.
- Plötzliches und schnelles Entfernen des Gehörschutzstöpsel aus denn Gehörgang kann zu Beschwerden führen.
- Bitte keine scharfen Gegenstände in den Kanal oder Filter des Gehörschutzes einführen.
- Filter Music Premium dürfen nicht nass werden.
- Swim Ohrstöpsel nicht bei einer Tiefe von mehr als 3 Metern benutzen.
- Tragen Sie Pluggierz Pro nicht, wenn das Risiko besteht das die Verbindungsschnur hinter bewegenden (Maschinen-) Teilen hängen bleibt.
- Einiger Länder oder Staaten können die Benutzung von Gehörschutz während der Fahrt verboten sein, überprüfen sie die lokalen und nationalen Verkehrsgesetze.
- Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden.

### FRANÇAIS

Pluggierz vous protège contre le risque de lésions auditives causées par le bruit. Les Pluggierz sont des protecteurs auditifs réutilisables constitués d'un matériau de silicone résistant et respectueux de la peau.

Entretien
Les Pluggierz doivent être nettoyés facilement à l'eau et au savon, ce qui assure une hygiène optimale. Pour le nettoyage du Music Premium, il est important de retirer le filtre avant de nettoyer le bouchon d'oreille. Assurez-vous de bien les sécher avant de les insérer dans vos oreilles ou avant de les remplacer dans la pochette.

*La déclaration de conformité CE : Comfoor B.V. déclare que les produits Pluggierz sont conformes au règlement CE 2016/425. Le texte complet de la déclaration de conformité CE est disponible sur notre site internet **www.pluggierz.com**.*

**Avertissements**

- Les produits Pluggierz ne peuvent apporter une protection optimale que s'ils sont utilisés de façon continue dans un environnement bruyant.

- N'y pas avaler.
- Maintenir hors de la portée des enfants jusqu'à l'âge de 3 ans.
- En cas de problèmes, contactez-nous ou consultez un spécialiste ou un médecin.

- Avant de l'utiliser, vérifiez que votre protection Pluggierz n'est pas endommagée, que le matériau n'est pas déchiré, qu'il n'a pas durci ou qu'il n'adhère pas. Assurez-vous également que le filtre est en place.
- N'utilisez jamais votre Pluggierz s'il est endommagé, si le matériau présente des signes de détérioration ou si le filtre n'est pas en place.
- Les protections Pluggierz doivent être nettoyées conformément aux instructions du fabricant.
- Le retrait soudain et rapide du bouchon d'oreille peut endommager le tympan.
- N'insérez pas d'objets tranchants à l'intérieur du canal ou du filtre des bouchons d'oreille.
- Les filtres Music premium doivent rester secs en permanence.
- N'utilisez pas le Pluggierz Swim à une profondeur d'eau supérieure à 3 mètres.
- Ne portez pas le Pluggierz Swim si le matériel de liaison se coince derrière des éléments (de machine) en mouvement.
- Pluggierz Road; certains pays ou états peuvent interdire l'utilisation de bouchons d'oreille lors de la conduite - vérifiez les lois de votre pays et de votre état en matière de conduite et de circulation.
- Ce produit peut être affecté par certaines substances chimiques. D'autres renseignements peuvent être obtenus auprès des fabricants.

- Si les Pluggierz sont mal insérés ou si les avertissements contenus dans les instructions d'utilisation ne sont pas respectés, ils peuvent ne pas offrir la protection complète Comfoor B.V. Pluggierz ne peut être tenu responsable d'utilisations incorrectes ou impropres ou du non-respect des avertissements indiqués ci-dessus. Pour plus d'informations, rendez-vous sur **www.pluggierz.com**
- N'utilisez jamais votre Pluggierz s'il est endommagé, si le matériau présente des signes de détérioration ou si le filtre n'est pas en place.
- Les protections Pluggierz doivent être nettoyées conformément aux instructions du fabricant.
- Le retrait soudain et rapide du bouchon d'oreille peut endommager le tympan.
- N'insérez pas d'objets tranchants à l'intérieur du canal ou du filtre des bouchons d'oreille.
- Les filtres Music premium doivent rester secs en permanence.
- N'utilisez pas le Pluggierz Swim à une profondeur d'eau supérieure à 3 mètres.
- Ne portez pas le Pluggierz Swim si le matériel de liaison se coince derrière des éléments (de machine) en mouvement.
- Pluggierz Road; certains pays ou états peuvent interdire l'utilisation de bouchons d'oreille lors de la conduite - vérifiez les lois de votre pays et de votre état en matière de conduite et de circulation.
- Ce produit peut être affecté par certaines substances chimiques. D'autres renseignements peuvent être obtenus auprès des fabricants.

- Si les Pluggierz sont mal insérés ou si les avertissements contenus dans les instructions d'utilisation ne sont pas respectés, ils peuvent ne pas offrir la protection complète Comfoor B.V. Pluggierz ne peut être tenu responsable d'utilisations incorrectes ou impropres ou du non-respect des avertissements indiqués ci-dessus. Pour plus d'informations, rendez-vous sur **www.pluggierz.com**
- N'utilisez jamais votre Pluggierz s'il est endommagé, si le matériau présente des signes de détérioration ou si le filtre n'est pas en place.
- Les protections Pluggierz doivent être nettoyées conformément aux instructions du fabricant.
- Le retrait soudain et rapide du bouchon d'oreille peut endommager le tympan.
- N'insérez pas d'objets tranchants à l'intérieur du canal ou du filtre des bouchons d'oreille.
- Les filtres Music premium doivent rester secs en permanence.
- N'utilisez pas le Pluggierz Swim à une profondeur d'eau supérieure à 3 mètres.
- Ne portez pas le Pluggierz Swim si le matériel de liaison se coince derrière des éléments (de machine) en mouvement.
- Pluggierz Road; el uso de tapones para oídos durante la conducción puede estar prohibido en algunos países.
- Algunos países o estados pueden prohibir el uso de tapones para oídos durante la conducción de vehículos - consulte las leyes de tráfico y circulación locales y del estado.
- Este producto puede verse afectado negativamente por determinadas sustancias químicas. Solicite información adicional al fabricante.

4 Lassen Sie die Ohrmuschel los und drücken Sie nochmals nach.

Pluggierz Uni-Fit Music Premium sind mit einem Set hochqualitativer Filter ausgestattet. Diese befinden sich standardmäßig in den großen Ohrstöpseln. Falls die großen Ohrstöpsel nicht passen, können die Filter einfach in die kleinen Ohrstöpsel eingesetzt werden. **Warnung:** ohne Filter haben die Ohrstöpsel nicht die Schutzwirkung. Gebrauchen Sie die Ohrstöpsel niemals ohne Filter.

Stellen Sie sicher, dass Ohrstöpsel bequem mit einer richtigen Dichtung im Ohr eingefügt sind. Wenn Sie denken die Dichtung nicht richtig versiegt, bei Zweifeln konsultiere Sie ein Spezialist.

Die Schutzwirkung der Gehörschutzstöpsel ist nur bei richtigem Sitz der Stöpsel gegeben.

Bewahren Sie die Pluggierz nach Benutzung in mitgelieferten Aufbewahrungsbox.

*Die EG Baumusterprüfung wurde von PZT 1974, An der Junkerei 48F, 26389, Wilhelmshaven, Dutsland und IFA 0121, Alte Herrstrasse 111, 53757 Sankt Augustin, Dutsland, durchgeführt.*

*Die Dämpfungswert des Gehörschutzes wurde gemäß der Europäischen Normen EN 352-2:2002.*

*Dabei wurden die APV, SNR, H, M, L Werte laut ISO 4869-2 bestimmt, Gewicht pro Set 1,6 gram, Durchmesser S-M 7-11mm M-L 8-13mm.*

*EU-Konformitätserklärung: Hiermit erklärt Comfoor b.v., das die PSA Pluggierz der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Der Vollständigkeit der EU-Konformitätserklärung ist unter folgenden Internet-Adressen verfügbar **www.pluggierz.com**.*

- Pluggierz Sollten in Übereinstimmung mit den Hinweisen des Herstellers gereinigt werden.
- Plötzliches und schnelles Entfernen des Gehörschutzstöpsel aus denn Gehörgang kann zu Beschwerden führen.
- Bitte keine scharfen Gegenstände in den Kanal oder Filter des Gehörschutzes einführen.
- Filter Music Premium dürfen nicht nass werden.
- Swim Ohrstöpsel nicht bei einer Tiefe von mehr als 3 Metern benutzen.
- Tragen Sie Pluggierz Pro nicht, wenn das Risiko besteht das die Verbindungsschnur hinter bewegenden (Maschinen-) Teilen hängen bleibt.
- Einiger Länder oder Staaten können die Benutzung von Gehörschutz während der Fahrt verboten sein,prüfen sie die lokalen und nationalen Verkehrsgesetze.
- Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden.

### ESPAÑOL

Pluggierz ofrece protección frente al riesgo lesiones auditivas provocadas por el ruido. Los protectores auditivos reutilizables están hechos de un material de silicona resistente e hipoalergénico.

**Mantenimiento**
Pluggierz ofrece productos que pueden limpiarse fácilmente con agua y jabón para asegurar una higiene óptima. Para la limpieza completa de la declaración de conformidad CE en nuestro sitio web: **www.pluggierz.com**.

- Si tiene cualquier queja, contáctenos o consulte con un médico o especialista.
- Antes del uso, inspeccione siempre el producto Pluggierz para identificar cualquier daño, como desgarro, endurecimiento o adhesión del material. Asegúrese también de que el filtro esté colocado.
- N'utilice nunca Pluggierz con un producto que presente signos de deterioro o si el filtro no está colocado correctamente.
- Limpie el producto Pluggierz de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- La retirada brusca y repentina de un tapón para oídos puede dañar el tímpano.
- N'insértelos nunca en el canal o filtro de los tapones para oídos.
- Los filtros Music Premium deben mantenerse secos en todo momento.
- No use los protectores auditivos Pluggierz Pro si existe el riesgo de que el cordón quede atrapado en partes (de máquinas) en movimiento.
- Pluggierz Road; el uso de tapones para oídos durante la conducción puede estar prohibido en algunos países.
- Algunos países o estados